

Pocket ECG machine

PCECG - 500




El monitor LEPU PCECG-500 ofrece la funcionalidad de recopilar, analizar, almacenar y transmitir datos de ECG de 12 derivaciones. Funciona en conjunto con el algoritmo de Glasgow para proporcionar un análisis completo e instantáneo.



Pantalla Táctil de **4.46"**



Trasmisión **WI-FI**

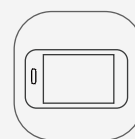

250 gr de peso



Algoritmo **Glasgow**



>24 h de tiempo de trabajo



Cámara **HD**

Características Funcionales

- 4.46" pantalla LCD táctil a color, diseño portátil, tamaño pequeño y peso ligero, fácil de transportar.
- Alimentado por energía externa de corriente continua o batería de litio recargable incorporada que soporta un tiempo de trabajo continuo >24 horas.
- Admite la adquisición y visualización simultánea de 6/12 formas de onda de plomo y detección de ritmo cardíaco.
- Proporciona algoritmos de análisis convencionales de Glasgow para analizar automáticamente las formas de onda de ECG adquiridas y emitir valores de medición y resultados diagnósticos.
- Admite modo automático y modo R-R, admite detección y marcado automáticos de marcapasos.
- Proporciona 4 modos de muestreo: muestreo previo, muestreo en tiempo real, muestreo periódico y muestreo desencadenado.
- Admite ADS (Sistema Antidrift) e interferencia de EMG (Electromiografía). Admite transferencia de datos por correo electrónico.



Diseño portátil y adquisición de múltiples derivaciones.

Liviano y Portátil

LEPU Pocket ECG Machine es portátil, ligero y fácil de usar. Esta máquina de ECG de bolsillo solo pesa 250g, aproximadamente del tamaño de un teléfono inteligente. En comparación con la tradicional y pesada máquina de ECG, nuestro pequeño ECG es una excelente opción para la monitorización al lado de la cama.


6/12 Derivaciones

Admite la adquisición y visualización sincrónica de la forma de onda de 6/12 derivaciones, así como la detección de la frecuencia cardíaca e indicación de mala conexión de electrodos.




Funciones de transferencia ventajosas.

Se pueden enviar los informes de ECG al remoto por correo electrónico, de forma muy conveniente y rápida.

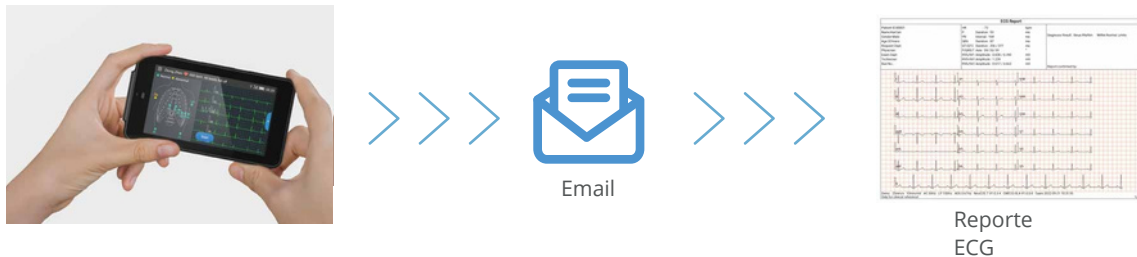

Soporte de múltiples métodos de transmisión de datos a través de una red Wi-Fi e impresión de informes de ECG a través de una impresora externa.

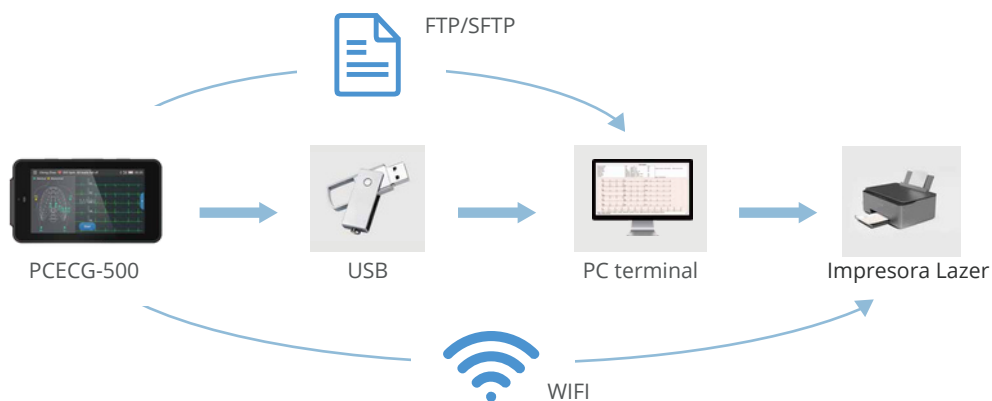

Aplicaciones



Shenzhen Carewell Electronics Co., Ltd.

Add: Floor 4, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District 518108, Shenzhen, P.R. China

Tel: + 86 755 2643 3514 Fax: + 86 755 2643 0930 E-mail: info@carewell.com.cn

 **LEPU MEDICAL**
<https://en.lepumedical.com>