

Holter HT 103™

Sistema de registro y análisis de ECG ambulatorio de 3 canales.

Características



48 hs de grabación con 1 pila AA



Peso liviano



Adaptable a cables de **5/7** electrodos



24/48 Hs Registro



Apto para niños y neonatos



Descarga a través de memoria SD extraíble



Impresión de tiras de scan de hasta 60 min. con eventos resaltados



99,53% Precisión



Firma digital



Canales



Licencia única de software para múltiples grabadoras



Software disponible en español/inglés/francés





Beneficios


Exclusiva herramienta de visualización de arritmias con tendencias de frecuencia cardíaca, scan y registro en la misma pantalla.

Exclusivo módulo de detección automática de Fibrilación Auricular.

Exportación en diferentes formatos con la posibilidad de procesar el estudio en otra PC facilitando la realización de interconsultas con colegas.

Monitoreo online de la señal de ECG que permite verificar la correcta adquisición y evitar la repetición de estudios.

Reportes configurables incluyendo sumario automático.

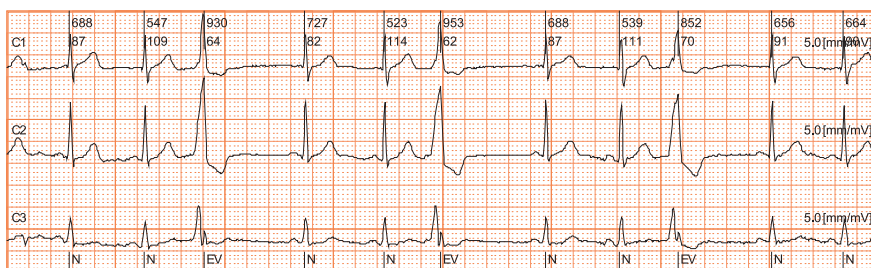

Configuración de parámetros adaptables en cada paciente para un mejor diagnóstico.

Análisis de VFC en el dominio temporal y frecuencial, discriminando períodos de actividad y reposo. Análisis de segmentos ST e intervalos QT. Tendencias de frecuencia cardíaca, ST, QT e intervalos RR.

Detección automática de eventos cardíacos, artefactos y arritmias en todos los canales. Potente herramienta de extracción de plantillas que facilita el diagnóstico y optimiza su tiempo.



Además sumás puntos en nuestro club de fidelización. Sólo válido en Argentina.

Para más información:
 Ventas Argentina: ventas@eccosur.com
 Ventas Internacionales: comex@eccosur.com