



Frontoluz para Examen y Cirugía Menor

BT - 410F

BT - 410A

 **bistos**


Frontoluz de Procedimientos y Cirugía Menor



BT-410 F

Uniformidad de iluminación

La estructura de múltiples lentes asegura un alto nivel de luminancia uniforme en su punto de luz.

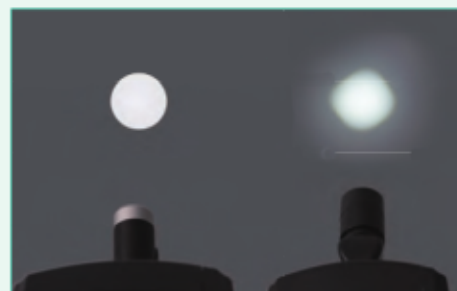

Diseño coaxial

La fuente de luz que se encuentra entre dos ojos es capaz de proyectar la menor cantidad de sombras en la superficie. Además, el ángulo de luminancia se mueve libremente con la estructura de la junta de pivote.



Batería intercambiable

La batería recargable es intercambiable. Con batería adicional, ya no tendrá que preocuparse por la energía restante.



Frontoluz de Examen y Procedimientos



BT-410 A



Punto de luz ajustable

El punto de luz es ajustable de 30 mm a 70 mm a una distancia de 300 mm.

Lámpara Astral

La lámpara astral adicional aumenta más la iluminación y disminuye la sombra en la superficie.



Lupa

La lupa de lente única es liviana y simple, pero proporciona un aumento de 2x.

BISTOS Especificaciones Técnicas

*Opción

Modelo		BT - 410	
Código de Orden		410F	410A
Iluminación	Estandar	15,000 - 30,000 lx	60,000 lx
	Lámpara Astral		50,000 lx
Iluminación ajustable		O	X
Uniformidad de iluminación		Alta	Baja
Punto de luz ajustable		X	O
Tamaño del punto de luz (a 300 mm)		70mm	30 - 70mm
Lámpara astral *		X	O
Temperatura del color		6,000 K	
Vida útil del LED		Aprox. 50,000 horas	
Lupa*	Tipo	Único Lente	
	Aumento	2 x	
Batería	Tipo	Iones de litio	
	Capacidad	3.7V / 2,600 mAh	
	Tiempo de ejecución	4 horas	
	Tiempo de carga	4 horas	
Peso		190 g	
Tamaño de la banda		540 - 640mm	
Garantía		1 año	

BIO SIGNAL TOTAL SOLUTION

Bistos Co., Ltd. (Sede)

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82 (31) 750 0340
Fax. +82 (31) 750 0344

bistos@bistos.co.kr
www.bistos.co.kr

Bistos America Inc. (Sucursal de US)

11417 W Bernardo Ct Ste D, San Diego, CA 92117, USA
Tel. +1-868-433-6689
Fax. +1-888-391-5153
Site . www.bistosamerica.com
E-mail . info@bistosamericainc.com