

Descartables para Pruebas Respiratorias de Vitalograph



the difference is clear








Descartables para Pruebas Respiratorias de Vitalograph

Vitalograph[®]
Your respiratory partner

BVF™ Filtros Bacterianos/Virales


- Filtros de un solo uso para una efectiva remoción de bacterias, virus y expectoraciones
- Adecuados para pruebas de espirometría inspiratorias y espiratorias
- Protege a los sujetos contra contaminación cruzada
- Protege al espirómetro contra contaminación cruzada
- Validados con una eficiencia del 99.99% por contaminación cruzada tanto para bacterias como para virus
- Muy baja impedancia al flujo espiratorio
- Bajo espacio muerto efectivo de 65ml como lo requerido en pruebas de volumen pulmonar y DLCO
- Eficiente en altos flujos
- Precio muy atractivo



Código:	Color:	Para calzar en espirómetros de:
28350	Azul <small>(Boquilla pequeña)</small>	 Vitalograph, MIR, Micro Medical y la mayoría de los espirómetros de oficina
28362	Blanco	 La mayoría de los Equipos para PFT, incluyendo Sensormedics, PK Morgan, Ganshorn (nuevo)
28363	Claro	 PFTs de Jaeger/VIASYS/Carefusion
28365	Verde Azulado	 PFTs de MedGraphics
28375	Gris	 Chest, Fukuda, Minato
28368	Verde	 Ferraris/nSpire/PDS/KoKo
28401	Traslúcido <small>(Calza en Jeringas)</small>	 La mayoría de los espirómetros, de oficina, incluyendo Vitalograph, Medisoft, Cosmed, MIR, Micro Medical, ZAN, H.R y otras aplicaciones

A diferencia de los filtros de barrera que atrapan el material expectorado y permiten el paso de virus y bacterias, los filtros Vitalograph utilizan un material cargado electrostáticamente que atrapa el material expectorado además de bacterias y virus para una protección altamente efectiva contra contaminación cruzada.

Además de los beneficios de higiene por usar filtros bacterianos virales, también aumentan la productividad en pruebas de función pulmonar reduciendo el tiempo desperdiciado en limpieza y descontaminación de los aparatos para las pruebas.

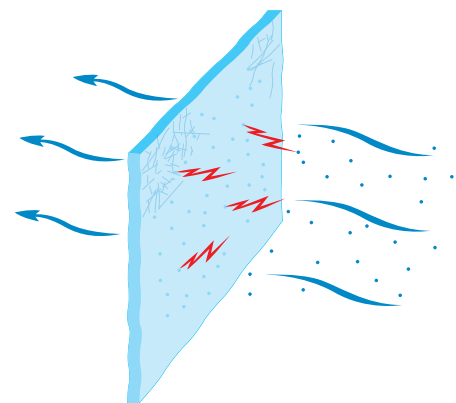

Kits para Pruebas de Función Pulmonar

- ❖ Kits completos para pruebas de función pulmonar para uso con analizadores de función pulmonar y espirómetros de oficina
- ❖ Diseñados para proveer alta protección contra contaminación cruzada
- ❖ Diseñados ergonómicamente para confort y fácil uso
- ❖ Los kits pueden incluir BVF, boquillas, codos y pinzas nasales opcionales
- ❖ Precios atractivos
- ❖ Totalmente descartables



Todos los Kits de PFT pueden ser suministrados con cualquier BVF o boquillas de Vitalograph, aunque no estén aquí listados..



Boquillas tipo mordillo de silicona ya sea para un solo uso o lavables y desinfectables (a elección del usuario)



Boquilla sintética de mordida y plástico, de un solo uso, desechable

Su elección con boquillas tipo mordillo o de plástico

- ❖ Boquillas de alta calidad diseñadas para uso con cualquier tamaño de filtro
- ❖ Diseñadas ergonómicamente para calce confortable
- ❖ Precios atractivos
- ❖ Totalmente descartables o lavables

Boquillas SafeTway®

- ❖ Protegen al sujeto contra contaminación cruzada
- ❖ Adecuadas para maniobras espiratorias con picos de flujo y espirómetros
- ❖ La válvula de una sola dirección previene la inhalación desde el espirómetro



Especificaciones Técnicas:

Nombre del Producto: Filtro B/V

Modelo No: 2820

Eficiencia: 99.99% @ 55 y 750 L/min

**Validación utilizando Bacillus Subtilis
varadiniger mean dia.:** 0.7 to 1 µm

**Resistencia al Flujo @ 750L/min
(solo el BVF):** 0.08kPa/L/s (0.8 cmH2O)

**Resistencia al Flujo @ 750L/min
(BVF + Fleisch):** 0.12kPa/L/s (1.2 cmH2O)

**Espacio Muerto Efectivo
(excluyendo Tapas):** 65mL

Material: Tecnología de Nanofibra
Electrostática del medio filtrante

**Todos los Descartables para Pruebas
Respiratorias Diseñados y Fabricados bajo
las Normas:**

ISO 13485:2003, FDA 21CFR820, CDMR

Normas de Seguridad Medica:

Directivas para Aparatos Médicos 93/42/EEC
(con correcciones)

Vitalograph es un proveedor líder mundial de aparatos de alta calidad para el diagnóstico cardiorrespiratorio, servicios para investigaciones clínicas y service ded equipamiento médico. Con un patrimonio pionero de excelencia que abarca medio siglo, Vitalograph continúa ap9713.o vcaloscas contribucionesan u2a tlencnno médira fdirz yn u2amejedor calidad devlidd.



Ventas en Reino Unido
Vitalograph Ltd.
Maids Moreton Buckingham
MK18 1SW Inglaterra
Tel: 01280 827110
Fax: 01280 823302
e-mail: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.co.uk

Ventas de Exportación
Vitalograph Ltd.
Maids Moreton Buckingham
MK18 1SW Inglaterra
Tel: +44 1280 827120
Fax: +44 1280 823302
e-mail: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.eu

Vitalograph GmbH
Rellinger Strasse 64a
20257 Hamburg
Alemania
Tel: (040) 547391-0
Fax: (040) 547391-40
e-mail: info@vitalograph.de
www.vitalograph.de

Vitalograph Inc.
13310 West 99th Street
Lenexa Kansas 66215 USA
Toll Free: 800 255 6626
Tel: (913) 730 3200
Fax: (913) 730 3232
e-mail: vitcs@vitalograph.com
www.vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd.
Gort Road Business Park
Ennis
Co Clare, Irlanda
Tel: (065) 6864100
Fax: (065) 6829289
e-mail: sales@vitalograph.ie
www.vitalograph.ie